

STEEN-EXTRACTIE BALLONNEN

ÉÉN BALLON, DRIE DOORSNEDES

Voor het op betrouwbare wijze verwijderen van kleine stenen en slib uit het galkanaal, biedt MICRO-TECH een assortiment van hoogwaardige 3-lumige extractieballonnen. De conische, atraumatische punt van de katheter, in combinatie met de twee röntgenmarkeringen, zorgt voor een gemakkelijke en exacte positionering. De cilindrisch gevormde ballon zelf is gemaakt van hoogwaardig latex en kan worden opgeblazen tot drie diameters. Voor elke


ballondiameter wordt een geschikte, gekalibreerde wegwerpspuit meegeleverd. Na het opblazen ligt de ballon tegen de galkanaalwand, waardoor een efficiënte en volledige reiniging van het galkanaal gewaarborgd is. Een afzonderlijke lumaal voor een voerdraad van 0,035 inch en één voor contrastmiddel verbetert het gebruiksgemak en de afgifte van contrastmiddel.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- 3-fasige ballonnen
- Per diameter een gekalibreerde spuit
- Hoogwaardig latex
- 3 Luminale voor insufflatie, voerdraad en contrastmiddel
- Goede radiopaque



3-lumige steen-extractieballon van MICRO-TECH

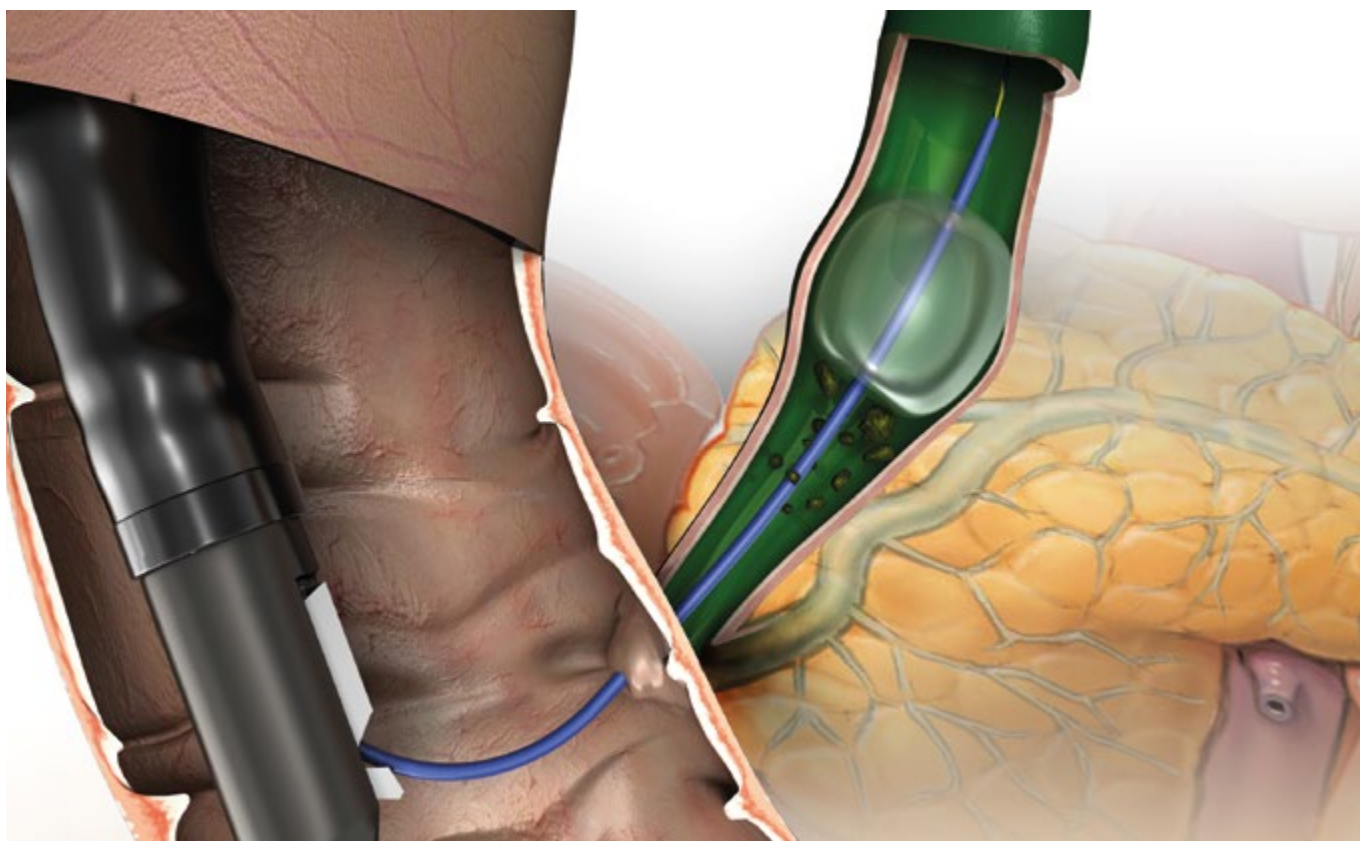

SPECIFICATIES

REF	Ø inches	Totale lengte mm	Lengte punt mm	Vorm van de punt	Configuratie	Uitvoering
KLASSIEKE VOERDRADEN						
600382-5	0,035"	4200	130	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Extra stijf

REF	Injectie	Luminalen	Ø Katheter fr.	Ø Ballon mm	Werklengte mm
STEEN-EXTRACTIEBALLONNEN					
SRB-T-9/12/15-20	Above (distaal t.o.v. de ballon)	3	7	9 / 12 / 15	2000
SRB-T-12/15/18-20	Above (distaal t.o.v. de ballon)	3	7	12 / 15 / 18	2000
SRB-T-15/18/21-20	Above (distaal t.o.v. de ballon)	3	7	15 / 18 / 21	2000
SRB-T-9/12/15-20-B	Below (proximaal t.o.v. de ballon)	3	7	9 / 12 / 15	2000
SRB-T-12/15/18-20-B	Below (proximaal t.o.v. de ballon)	3	7	12 / 15 / 18	2000
SRB-T-15/18/21-20-B	Below (proximaal t.o.v. de ballon)	3	7	15 / 18 / 21	2000

Aanbevolen voerdraden: MTN-BM 89/45-A (0,035 recht) en 600358 -5 (0,035 recht)
Verpakkingseenheid: 1 stuks