

SWEEPER STEINEXTRAKTIONSBALLONS


EIN BALLON, DREI DURCHMESSER

Für die zuverlässige Entfernung von kleinen Steinen und Sludge aus dem Gallengang umfasst das Sortiment von MICRO-TECH hochwertige 3-lumige Extraktionsballons. Die konische, atraumatische Spitze des Katheters sorgt in Verbindung mit den beiden Röntgenmarkierungen für eine leichte und exakte Positionierung. Der zylindrisch geformte Ballon selbst ist aus hochwertigem Latex gefertigt und lässt sich auf drei Durchmesser weiten. Für jeden Ballon-


durchmesser wird eine entsprechend geeichte Einmalspritze mitgeliefert. Nach der Insufflation liegt der Ballon bündig an der Gallengangwand, so dass eine effiziente und vollständige Reinigung des Gallengangs gewährleistet ist. Ein separates Lumen für einen 0,035 Inch Führungsdraht und eines für Kontrastmittel erleichtern die Handhabung und Kontrastmittelgabe.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- 3-stufige Ballons
- Je Durchmesser eine geeichte Spritze
- Hochwertiges Latex
- 3 Lumina für Insufflation, Führungsdraht und Kontrastmittel
- Gute Röntgensichtbarkeit

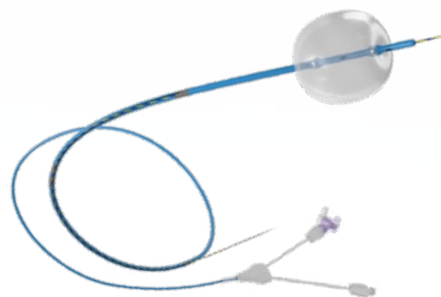

3-lumiger Steinextraktionsballon von MICRO-TECH

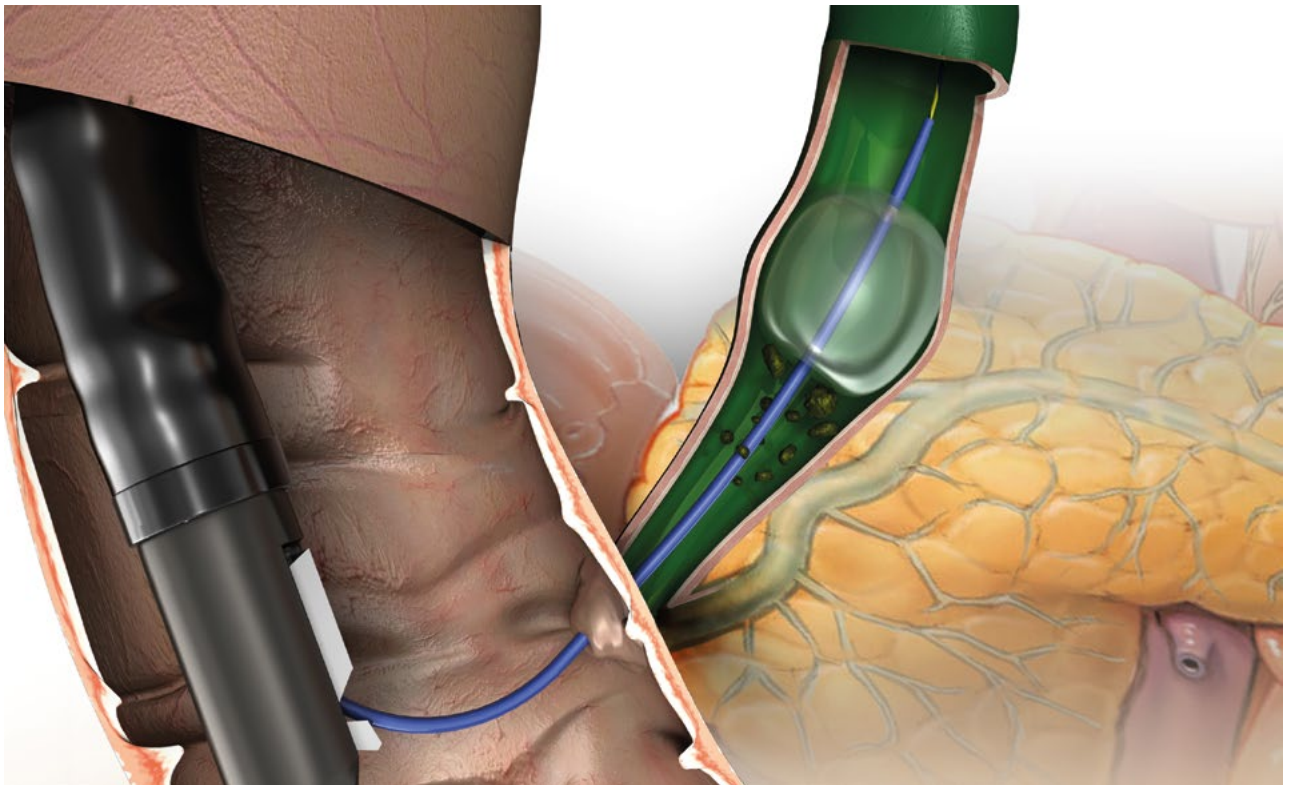

SPEZIFIKATIONEN

REF	Ø inches	Gesamt-länge mm	Spitzen-länge mm	Spitzenform	Konfiguration	Ausstattung
FÜHRUNGSDRÄHTE						
MTN-BM-89/26-A	0,035"	2600	65	gerade	hydrophil, röntgendicht	blau-gelb ummantelt
MTN-BM-89/26-A-J	0,035"	2600	65	J-Form	hydrophil, röntgendicht	blau-gelb ummantelt
MTN-BM-63/26-A	0,025"	2600	65	gerade	hydrophil, röntgendicht	blau-gelb ummantelt
MTN-BM-63/26-A-J	0,025"	2600	65	J-Form	hydrophil, röntgendicht	blau-gelb ummantelt

Verpackungseinheit: 2 Stück

REF	Injektion	Lumina	Ø Katheter Fr.	Ø Ballon mm	Arbeitslänge mm
SWEEPER STEINEXTRAKTIONSBALLONS					
RSRB-T-9/12/15-20	Above (distal zum Ballon)	3	7	9 / 12 / 15	2000
RSRB-T-12/15/18-20	Above (distal zum Ballon)	3	7	12 / 15 / 18	2000
RSRB-T-15/18/21-20	Above (distal zum Ballon)	3	7	15 / 18 / 21	2000
RSRB-T-9/12/15-20-B	Below (proximal zum Ballon)	3	7	9 / 12 / 15	2000
RSRB-T-12/15/18-20-B	Below (proximal zum Ballon)	3	7	12 / 15 / 18	2000
RSRB-T-15/18/21-20-B	Below (proximal zum Ballon)	3	7	15 / 18 / 21	2000

Verpackungseinheit: 1 Stück