

# SWEEPER STEEN-EXTRACTIE BALLONNEN


## ÉÉN BALLON, DRIE DOORSNEDES

Voor het op betrouwbare wijze verwijderen van kleine stenen en slib uit het galkanaal biedt MICRO-TECH een assortiment van hoogwaardige 3-lumige extractieballonnen. De conische, atraumatische punt van de katheter, in combinatie met de twee röntgenmarkeringen, zorgt voor een gemakkelijke en exacte positionering. De cilindrisch gevormde ballon zelf is gemaakt van hoogwaardig latex en kan worden opgeblazen tot drie diameters. Voor


elke ballondiameter wordt een geschikte, gekalibreerde wegwerpspuit meegeleverd. Na het opblazen ligt de ballon tegen de galkanaalwand waardoor een efficiënte en volledige reiniging van het galkanaal gewaarborgd is. Een afzonderlijke lumaal voor een voerdraad van 0,035 inch en één voor contrastmiddel verbetert het gebruiksgemak en de afgifte van contrastmiddel.

### BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- 3-fasige ballonnen
- Per diameter een gekalibreerde spuit
- Hoogwaardig latex
- 3 Luminale voor insufflatie, voerdraad en contrastmiddel
- Goede radiopaque

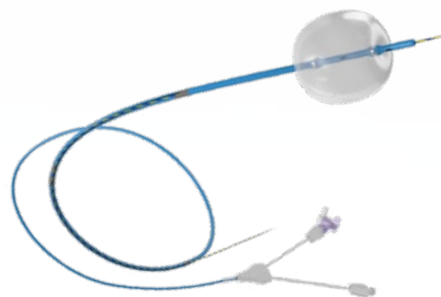

3-lumige steen-extractieballon van MICRO-TECH

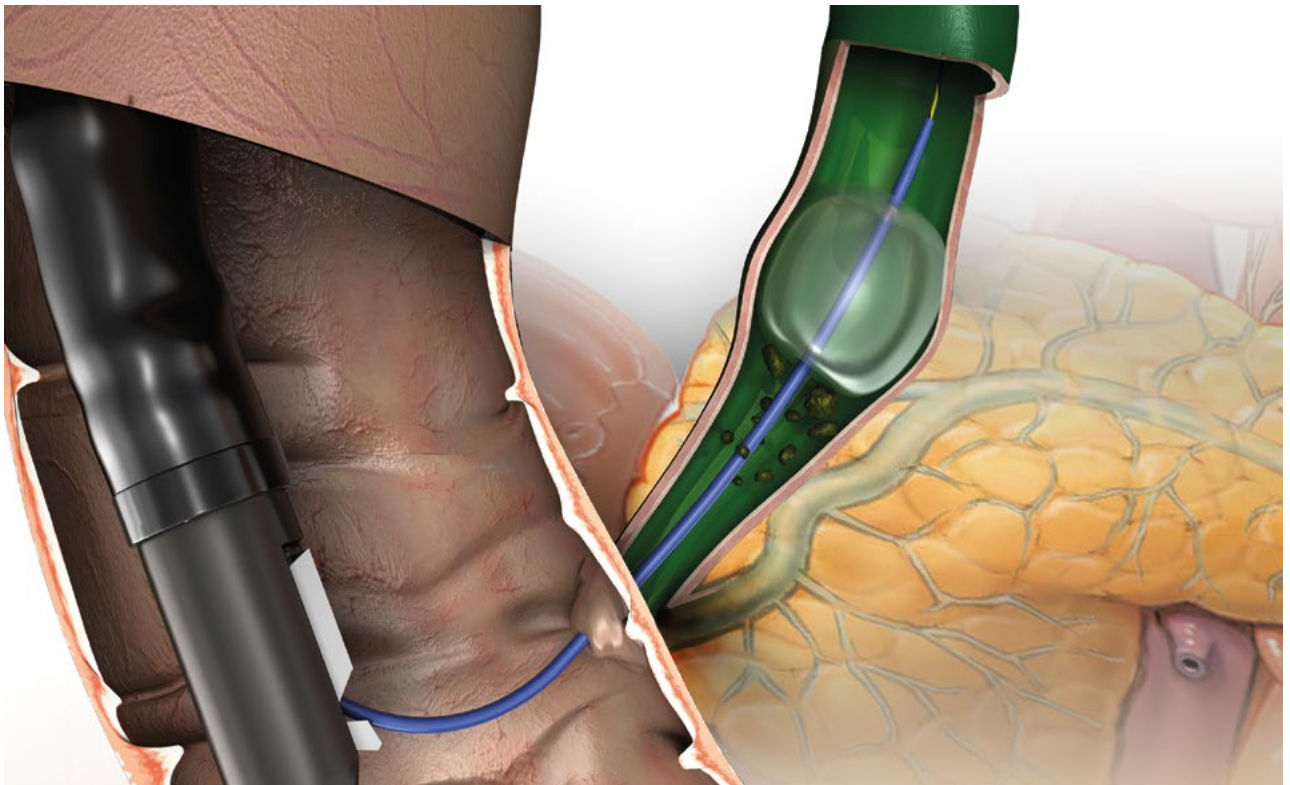

## SPECIFICATIES

REF	Ø inches	Totale lengte mm	Lengte van de punt mm	Vorm van de punt	Configuratie	Uitvoering
<b>VOERDRADEN</b>						
MTN-BM-89/26-A	0,035"	2600	65	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-89/26-A-J	0,035"	2600	65	J-vorm	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-63/26-A	0,025"	2600	65	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-63/26-A-J	0,025"	2600	65	J-vorm	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld

Verpakkingseenheid: 2 stuks

REF	Injectie	Luminalen	Ø Katheter fr.	Ø Ballon mm	Werklengte mm
<b>SWEEPER STEEN-EXTRACTIEBALLONNEN</b>					
RSRB-T-9/12/15-20	Above (distaal t.o.v. de ballon)	3	7	9 / 12 / 15	2000
RSRB-T-12/15/18-20	Above (distaal t.o.v. de ballon)	3	7	12 / 15 / 18	2000
RSRB-T-15/18/21-20	Above (distaal t.o.v. de ballon)	3	7	15 / 18 / 21	2000
RSRB-T-9/12/15-20-B	Below (proximaal t.o.v. de ballon)	3	7	9 / 12 / 15	2000
RSRB-T-12/15/18-20-B	Below (proximaal t.o.v. de ballon)	3	7	12 / 15 / 18	2000
RSRB-T-15/18/21-20-B	Below (proximaal t.o.v. de ballon)	3	7	15 / 18 / 21	2000

Verpakkingseenheid: 1 stuks