

INJEKTIONSNADELN

ZUVERLÄSSIG UND SICHER BIS IN DIE SPITZE

Die Einmal-Injektionsnadeln von MICRO-TECH erleichtern den klinischen Alltag dank ergonomischem Handgriff und besonders scharfer Nadel. Das rutschfeste Design ermöglicht eine komfortable Steuerung mit nur einer Hand. Für

noch präzisere Punktionen kann die Nadel in mehreren Stufen einrasten. Wird die Nadel entriegelt, schnellst sie vollständig in den Katheter zurück, um Beschädigungen am Arbeitskanal zu verhindern.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Regulierbares Druckpolster
- Automatischer Nadel-Einzug
- Weicher, atraumatischer Silikonkopf
- Nadel mit extrem scharfem Präzisionsschliff
- Unterschiedliche Nadel-Durchmesser
- LL-Spritzenanschluss



Nadel vollständig eingefahren




Handliches ergonomisches Design

SPEZIFIKATIONEN

REF	Nadellänge mm	Nadel Ø	Arbeitskanal Ø mm	Länge mm
INJEKTIONSNADELN – POLYPEKTOMIE /EMR				
IN12-195232302	5	19 G = 0,9 mm	2,8	2300
IN12-225232302	5	22 G = 0,7 mm	2,8	2300
IN12-255232302	5	25 G = 0,5 mm	2,8	2300
INJEKTIONSNADELN – ESD				
IN12-224232302	4	22 G = 0,7 mm	2,8	2300
IN12-254232302	4	25 G = 0,5 mm	2,8	2300

Verpackungseinheit: 10 Stück

Auch in weiteren Ausführungen erhältlich

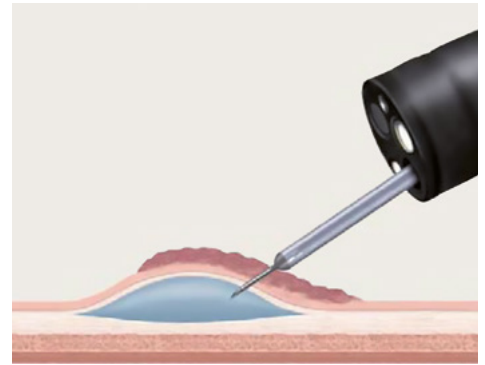

SAFETY NEEDLE SN

PRÄZISION MIT EINMALIGEM SICHERHEITSKONZEPT

Mit den Injektionsnadeln von bauer medical sind Punktionen sicher und präzise. Verantwortlich dafür ist zum einen der Handgriff. Er zeichnet sich durch seine ergonomische Form aus und sorgt für ein taktiles Gefühl und eine hörbare Arretierung. Zum anderen gewährleistet der spezielle Facettenschliff der Nadel auch unter schwierigen Bedingungen einen präzisen Einstich. Für noch

mehr Schutz sorgt das Sicherheitskonzept der Safety-Injektionsnadeln. Somit werden nach Beendigung der Anwendung durch Abknicken des proximalen Handgriffs an der Sollbruchstelle die Vorgaben der UVV noch besser erfüllt. Der erzwungene Verbleib der Nadelspitze im Katheter hilft so Verletzungen zu vermeiden.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Handgriff mit taktilem Ergonomie
- Nadel mit speziellem Facettenschliff
- Distaler Protektor-Kopf für Nadelspitze
- CLICK-Geräusch beim Aus- und Einfahren der Nadel
- Einzigartiges Sicherheitskonzept für verletzungsfreie Entsorgung
- Nadel Durchmesser von 0,5 / 0,7 / 0,9 mm



Einrastbare Facettenschliff-Nadel im Metallkopf



Ergonomischer Handgriff mit definierter Sollbruchstelle

SPEZIFIKATIONEN

REF	Nadelhub mm	Nadel Ø mm	Tubus Ø mm	Länge mm
INJEKTIONSNADELN SAFETY NEEDLE SN				
SN1-I10-505-18-120	5	0,5	1,8	1200
SN1-I10-505-18-180	5	0,5	1,8	1800
SN1-I10-507-23-230	5	0,7	2,3	2300
SN1-I10-509-23-230	5	0,9	2,3	2300

Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Größen auf Anfrage