



ACCESSOIRES

ENDOSCOPIE-ACCESSOIRES EN BORSTELS

ENDOSCOPIE-ACCESSOIRES VOOR EENMALIG GEBRUIK

OPTIMAAL UITGERUST BIJ ELKE INGREEP

MICRO-TECH biedt u een optimaal assortiment endoscopieproducten. Het assortiment omvat belangrijke producten voor uw dagelijkse praktijk zoals werkveiligheidsvoorzieningen voor artsen en personeel, maar ook oplossingen

die het comfort van de patiënt vergroten. MICRO-TECH is gecertificeerd volgens DIN EN13485:2010. Alle producten zijn getest en gecertificeerd conform de geldende richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.



BIJTRING

Er zijn verschillende configuraties beschikbaar: Standaard, pediatrie bijtringen en atraumatisch gevormde bijtringen



BIOPSIE VENTIEL MET SPOELAANSLUITING

Geschikt voor Olympus en FujiFilm-endoscopen



POLIEPENVAL

Dit 4-kamersysteem biedt de mogelijkheid om maximaal 4 poliepen afzonderlijk op te vangen



BIOPSIE VENTIEL

De ventieldoppen voor het biopsiekanaal passen op endoscopen van Olympus, FujiFilm en Pentax

SPECIFICATIES

| REF | Omschrijving | Maat |
|--------------------------|---|------------------|
| BIJTRING | | |
| AC01-102.M | Bijtring geel, zonder hoofdband | Medium (M) |
| AC01-103.A | Atraumatisch gevormde bijtring blauw, latexvrije textiel-hoofdband | Atraumatisch (A) |
| AC01-103.M | Bijtring blauw, textiel-hoofdband | Medium (M) |
| AC01-103.P | Pediatische bijtring, latexvrije textiel-hoofdband | Pediatisch (P) |
| AC01-150 | Losse hoofdband van textiel | Medium (M) |
| BIOPSIE VENTIELEN | | |
| AC03-102.O | blauw, voor Olympus- en Fujifilm-endoscopen (vanaf G5) | |
| AC03-101.P | rood, voor Pentax-endoscopen | |
| AS2450000 | Ventieldop biopsiekanaal met spoelaansluiting, geschikt voor Olympus en Fuji-endoscopen | |
| AS2460000 | Ventieldop biopsiekanaal met spoelaansluiting, geschikt voor Pentax-endoscopen | |
| POLIEPENVAL | | |
| BBP-50 | Poliepenval met 4 verzamelkamers | |



REINIGINGSBORSTELS

DE STANDAARD VOOR BETROUWBARE HYGIËNE

De reinigingsborstels voor eenmalig gebruik van MICRO-TECH zorgen voor een optimaal gereinigde endoscoop, zodat het risico op kruisbesmetting aanzienlijk wordt geminimaliseerd. Bovendien beschermen de borstels ook uw endoscoop. Kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden voorkomen dat het werkkanaal van de

endoscoop tijdens het reinigen wordt beschadigd. Wilt u uw werk nog veiliger, sneller en efficiënter maken, dan raden we de dubbele reinigingsborstels met 2 koppen aan. Daarmee kunnen twee reinigingshandelingen in één keer worden uitgevoerd.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- 2 borstelkoppen voor tijdbesparende reiniging
- Beschermende kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden
- Borstels gemaakt van duurzaam nylon
- Individueel hygiënisch verpakt



Handgrepen



Nylon borstels

CONISCHE BORSTELKOPPEN

Het assortiment wordt compleet gemaakt met de reinigingsborstel met taps toelopende borstelkoppen. Afhankelijk van uw voorkeur, zijn borstels met gelijkblijvende en dunner wordende borstel diameters beschikbaar. Conische borstelkoppen worden aangegeven met een T in het productnummer.



NAAR KEUZE: 1 OF 2 BORSTELKOPPEN

Bij de reinigingsborstels met één kop vergemakkelijkt een ergonomische vingerring het terugtrekken van de borstel. Als alternatief wordt het gebruik van dubbele reinigingsborstels aanbevolen. Die hebben aan weerszijden een borstelkop, zodat met één handeling twee keer geborsteld wordt, waardoor het reinigingsresultaat aanzienlijk wordt verbeterd.



EXACT PASSENDE DIAMETERS

Of het nu gaat om een bronchoscoop of een therapeutische endoscoop – voor elke endoscoop hebben wij de ideale reinigingsborstel met een diameter van 3 mm tot 11 mm.



SPECIFICATIES

| REF | Katheter Ø mm | Totale lengte mm | Borstels Ø mm | Borstellengte mm |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| REINIGINGSBORSTELS MET ÉÉN BORSTELKOP | | | | |
| CB18-0050/18 | 1,8 | 1800 | 5 | 20 |
| CB18-0050/23 | 1,8 | 2300 | 5 | 20 |
| REINIGINGSBORSTELS MET TWEE BORSTELKOPPEN | | | | |
| CB18-3030/18 | 1,8 | 1800 | 3/3 | 20/20 |
| CB18-5050/18 | 1,8 | 1800 | 5/6 | 20/20 |
| CB18-5050/23 | 1,8 | 2300 | 5/5 | 20/20 |
| CB18-T5050/23 | 1,8 | 2300 | 5-7/5-7 toelopend | 20/20 |
| CB23-5050/23 | 2,3 | 2300 | 5/5 | 20/20 |
| DCBS-08-10-15-180 | 0,8 | 1800 | 1,5/1,5 | 10/10 |

Verpakkingseenheid: 100 stuks

De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.

COMBI-REINIGINGSBORSTELS

DE 2-IN-1 OPLOSSING VOOR DE DAGELIJKE PRAKTIJK

Voor het reinigen van de kanalen, de lucht-/waterventielen en hun inlaten zijn verschillende borstels nodig. MICRO-TECH biedt hiervoor slimme oplossingen, die de dagelijkse routine efficiënter en eenvoudiger maken.

Met de combinatieborstels en reinigingsborstelset van MICRO-TECH kunt u meerdere handelingen uitvoeren om de endoscopen weer gebruiksklaar te maken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen en endoscoopkanalen
- Intensieve en snelle reiniging
- Beschermende kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden
- Borstels van duurzaam nylon
- Ook als set individueel hygiënisch verpakt



Taps toelopen



Beschermkogel

ÉÉN BORSTEL VOOR ALLE VENTIELEN


De dubbele reinigingsborstel voor de lucht- en waterventielen biedt alles wat een borstel voor deze reiniging dient te hebben. Aan de ene kant zorgt een 40 mm lange en 11 mm dikke borstelkop voor een grondige reiniging van de ventielinlaten. Aan de andere kant kunnen de ventielopeningen met de 20 mm lange en 5 mm dikke borstel zorgvuldig gereinigd worden. Kogelkopjes aan de uiteinden van de twee borstels voorkomen dat de kanalen van de endoscoop worden beschadigd.



Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen

COMBINATIEBORSTELS MET DUBBELE FUNCTIE

Een reinigingsborstel met een conische borstelkop voor de endoscoopkanalen en een lange, groot-kaliber borstelkop voor de lucht/water-ventielopeningen, maakt het mogelijk om zowel de kanalen als de ventielopeningen met één reinigingsborstel te borstelen. Dat is tijd en kostenbesparend.

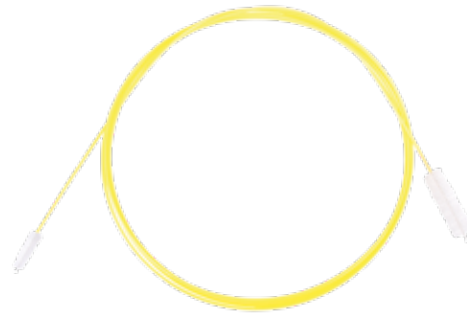

Combinatieborstel

SLIM EN GOEDKOOP: REINIGINGSBORSTELSET

Met deze set krijgt u handig in één keer, alle borstels die nodig zijn voor een grondige reiniging van de endoscoop. De set bestaat uit een reinigingsborstel voor een endoscoopkanaal en een reinigingsborstel voor een lucht/waterventiel. De borstels zijn individueel en hygiënisch verpakt in een zak.

SPECIFICATIES

| REF | Katheter Ø mm | Totale lengte mm | Borstels Ø mm | Borstellengte mm |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| REINIGINGSBORSTEL VOOR VENTIELOPENINGEN | | | | |
| CB13-50120/01 | 1,3 | 160 | 5/12 | 20/40 |
| COMBINATIEBORSTEL | | | | |
| CB18-T50110/23 | 1,8 | 2300 | 5-7 toelopend/11 | 20/40 |
| REINIGINGSBORSTELSET | | | | |
| CB18-T5050/23-B | | | | |
| CB18-T5050/23 | 1,8 | 2300 | 5-7 toelopend | 20/20 |
| CB13-50120/01 | 1,3 | - | 5/12 | 20/40 |

Verpakkingseenheid: 100 stuks

De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.

