

COMBI-REINIGINGSBORSTELS

DE 2-IN-1 OPLOSSING VOOR DE DAGELIJKE PRAKTIJK

Voor het reinigen van de kanalen, de lucht-/waterventielen en hun inlaten zijn verschillende borstels nodig. MICRO-TECH biedt hiervoor slimme oplossingen, die de dagelijkse routine efficiënter en eenvoudiger maken.

Met de combinatieborstels en reinigingsborstelset van MICRO-TECH kunt u meerdere handelingen uitvoeren om de endoscopen weer gebruiksklaar te maken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen en endoscoopkanalen
- Intensieve en snelle reiniging
- Beschermende kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden
- Borstels van duurzaam nylon
- Ook als set individueel hygiënisch verpakt



Taps toelopen



Beschermkogel

ÉÉN BORSTEL VOOR ALLE VENTIELEN


De dubbele reinigingsborstel voor de lucht- en waterventielen biedt alles wat een borstel voor deze reiniging dient te hebben. Aan de ene kant zorgt een 40 mm lange en 11 mm dikke borstelkop voor een grondige reiniging van de ventielinlaten. Aan de andere kant kunnen de ventielopeningen met de 20 mm lange en 5 mm dikke borstel zorgvuldig gereinigd worden. Kogelkopjes aan de uiteinden van de twee borstels voorkomen dat de kanalen van de endoscoop worden beschadigd.



Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen

COMBINATIEBORSTELS MET DUBBELE FUNCTIE

Een reinigingsborstel met een conische borstelkop voor de endoscoopkanalen en een lange, groot-kaliber borstelkop voor de lucht/water-ventielopeningen, maakt het mogelijk om zowel de kanalen als de ventielopeningen met één reinigingsborstel te borstelen. Dat is tijd en kostenbesparend.

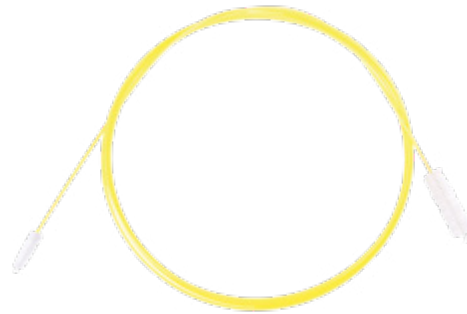

Combinatieborstel

SLIM EN GOEDKOOP: REINIGINGSBORSTELSET

Met deze set krijgt u handig in één keer, alle borstels die nodig zijn voor een grondige reiniging van de endoscoop. De set bestaat uit een reinigingsborstel voor een endoscoopkanaal en een reinigingsborstel voor een lucht/waterventiel. De borstels zijn individueel en hygiënisch verpakt in een zak.

SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Totale lengte mm	Borstels Ø mm	Borstellengte mm
REINIGINGSBORSTEL VOOR VENTIELOPENINGEN				
CB13-50120/01	1,3	160	5/12	20/40
COMBINATIEBORSTEL				
CB18-T50110/23	1,8	2300	5-7 toelopend/11	20/40
REINIGINGSBORSTELSET				
CB18-T5050/23-B				
CB18-T5050/23	1,8	2300	5-7 toelopend	20/20
CB13-50120/01	1,3	-	5/12	20/40

Verpakkingseenheid: 100 stuks

De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.