



EYEMAX

SINGLE-USE VIDEO CHOLANGIOPANCREATICOSCOPE

The image features a white and grey endoscopic handle with a large gear-like control knob and a power button, connected to a long, thin white video cable. The cable loops around the page and ends in a blue and silver video head. Below the handle is a white control unit with a blue panel containing several buttons. The background is white with faint circular lines.

EYEMAX SINGLE-USE VIDEO CHOLANGIOPANCREATICOSCOOP

DIRECTE VISUALISATIE VOOR DIAGNOSE EN BEHANDELING BIJ ENDOSCOPISCHE CHIRURGIE

- Betrouwbare procedure met laag risico bij de diagnose en behandeling van acute of chronische aandoeningen van de galwegen en de alveesklier
- Minder stralingsblootstelling vergeleken met standaard ERCP
- Hoge beeldresolutie voor nauwkeurigere diagnose, biopsie en behandeling van stenen, stenosen, infecties en tumoren
- Compatibel met alle gangbare EHL apparaten




CHOLANGIOSCOOP

HOGE RESOLUTIE, 120° GEZICHTSVELD

- Verbeterde weefselmonster afname, afzuiging en verwijdering van lichaamsvreemde voorwerpen
- Uitstekend beeld voor efficiënte steen-en weefselbehandeling
- Smalle buitendiameter voor eenvoudiger passeren van stenoses en minder traumatische plaatsing



4 RICHTINGEN STUURBAAR

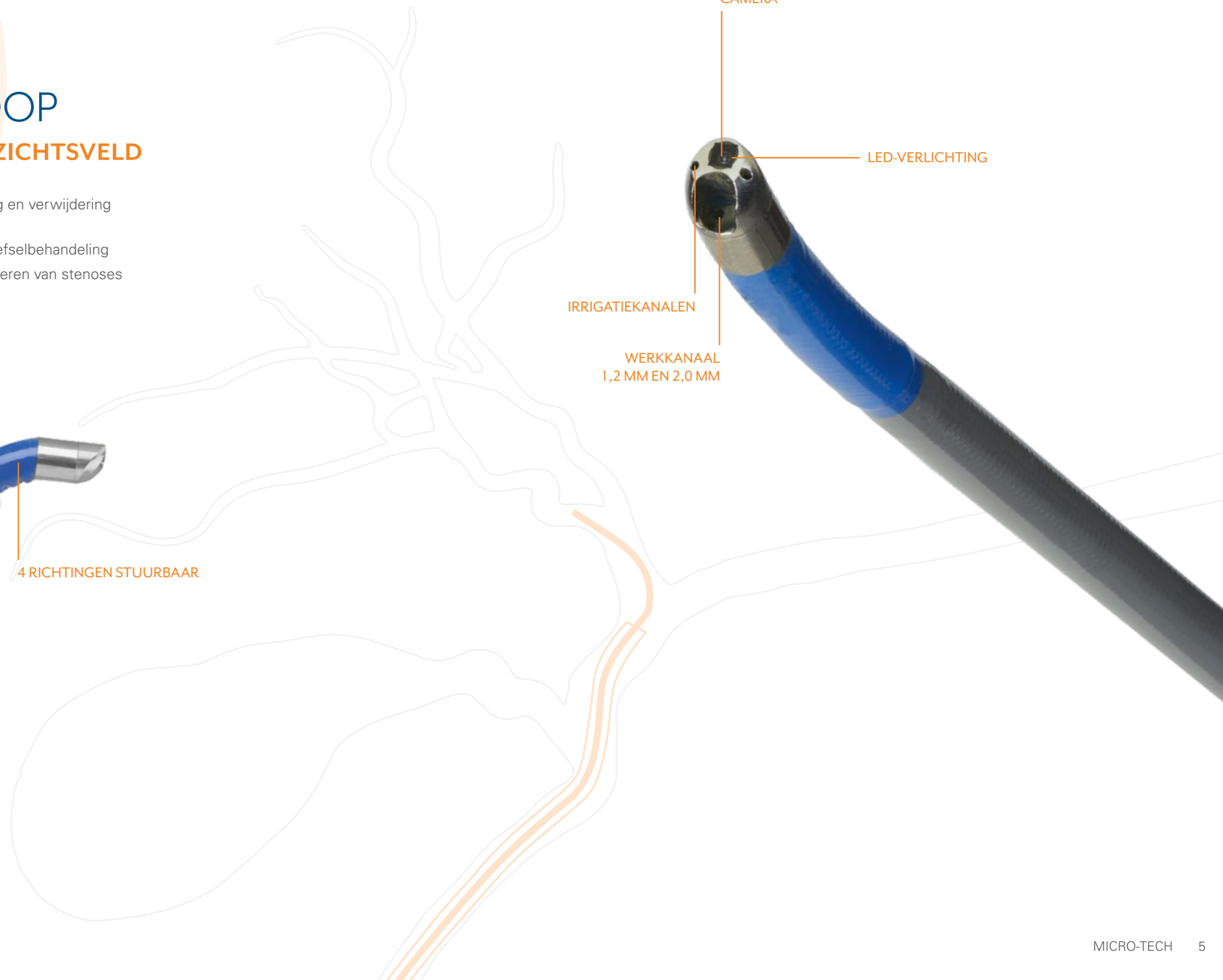

HOGE RESOLUTIE
CAMERA

LED-VERLICHTING

IRRIGATIEKANALEN

WERKKANAAL
1,2 MM EN 2,0 MM



TOEGANG WERKKANAAL MET
LUER-LOCK AAANSLUITING



VERGRENDELFUNCTIE OM DE
KIJKHOEK VAST TE ZETTEN



BEVESTIGINGS-
PUNT VOOR
HARNAS



BEVRIESKNOP OM HET
BEELD VAST TE ZETTEN



DUBBEL STUURWIEL OM
DISTALE TIP NAAR BOVEN/
ONDER EN LINKS/RECHTS
TE STUREN





AANSLUITING ENDOSCOOP

INTUÏTIEF BEDIENINGSPANEEL

HIGH PERFORMANCE PROCESSOR

EFFICIËNTE BEELDVERWERKING

- Videobeeldsignaal van hoge kwaliteit
- Eenvoudig te bedienen gebruikersinterface
- Beeldvergroting tot 3x
- Instelbare weergave van het beeld

UITSTEKENDE BEELDKWALITEIT

De EYEMAX cholangioscoop biedt uitstekende beeldkwaliteit met hoge resolutie voor optimale visualisatie van de galwegen en alvleesklier. Dit kan het aantal onderzoeken verminderen.



HARNAS

VOOR MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

- Ergonomisch alternatief voor conventionele bevestiging
- Ondersteuning tijdens langere onderzoeken omdat het gewicht van de cholangioscoop en duodenoscoop niet in één hand hoeft te worden gehouden
- Bediening van de cholangioscoop met één hand



Solide bevestiging van de cholangioscoop aan het harnas.



COMPATIBELE ACCESSOIRES

VOOR OPTIMAAL RESULTAAT

- Groot werkkanaal met een diameter van 1,2 of 2,0 mm voor eenvoudige en betrouwbare weefselafname
- Gemakkelijk inbrengen van de tang, zelfs met een gebogen endoscoop, dankzij het korte en stugge distale uiteinde van de tang
- Naast de irrigatiekanalen kunnen vloeistoffen ook worden geïnjecteerd via het werkkanaal



SPECIFICATIES

REF	max. katheter Ø mm	Werkkanaal Ø mm	Totale lengte mm				
PERORAAL							
CHOLANGIOSCOOP PERORAAL							
CDS11006	3,9	2,0	2200				
CDS22006	3,2	1,2	2200				
Verpakkingseenheid: 1 stuk							
REF	min. werkkanaal Ø mm	Lengte mm	Openingsbreedte mm	Lepel Ø mm	Prikker	Coating	Type
ACCESSOIRES (FORCEPS) PERORAAL							
BF10006	1,1	2900	3,0	1,0	Zonder	PTFE	Getand
BF16006	1,8	2900	4,5	1,6	Zonder	PE	Getand
Verpakkingseenheid: 2 stuks							


REF	max. katheter Ø mm	Werkkanaal Ø mm	Totale lengte mm				
PERCUTAAN							
CHOLANGIOSCOOP PERCUTAAN							
CDS11005	3,9	2,0	650*				
CDS22005	3,2	1,2	650*				
Verpakkingseenheid: 1 stuk							
REF	min. werkkanaal Ø mm	Lengte mm	Openingsbreedte mm	Lepel Ø mm	Prikker	Coating	Type
ACCESSOIRES (FORCEPS) PERCUTAAN							
BF10001	1,1	1200	3,0	1,0	Zonder	PTFE	Getand
BF16001	1,8	1200	4,5	1,6	Zonder	PE	Getand
Verpakkingseenheid: 2 stuks							

* Let op: Het harnas is niet geschikt voor de 650 mm cholangioscoop.

REF	Sterilisatie	Gebruik
HARNAS		
409501002	EO	Eenmalig gebruik
Verpakkingseenheid: 1 stuk		

REF	Interface	Afmetingen (LxWxH) mm	Netvoeding	Gewicht
PROCESSOR				
BS-W-100	DVI-D, Composite	355 x 297 x 107	230V	6 kg
KABEL**				
996-17913-0300	DVI-kabel	L 3000		
996-17907-0300	BNC-kabel	L 3000		
Verpakkingseenheid: 1 stuk				

** Let op: bij een bestelling van een Processor, beide kabels meebestellen.



Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Laatste update: 02.02.2024