



ACCESSOIRES

ENDOSCOPIE-ACCESSOIRES, -APPARATEN EN BORSTELS

DISPOSABLE ENDOSCOPIE-ACCESSOIRES

OPTIMAAL UITGERUST BIJ ELKE INGREEP

MICRO-TECH verzorgt voor u een optimaal assortiment endoscopieproducten. Het assortiment omvat belangrijke producten voor uw dagelijkse praktijk zoals werkveiligheidsvoorzieningen voor artsen en personeel, maar ook

oplossingen die het comfort van de patiënt vergroten. Alle producten zijn gestest en gecertificeerd volgens DIN EN13485:210 en voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.



BIJTRINGEN

Verschillende configuraties beschikbaar: standaard en pediatrie bijtringen, alsook atraumatische bijtringen



COLOSHORTS

Zacht, absorberend materiaal, kleur donkerblauw, met klittenbandsluiting te sluiten opening aan de achterzijde, tailleband met elastische band



BIOPSIEKANAAL-VENTIELDOP MET SPOELAANSLUITING

Geschikt voor Olympus- en Fujifilm-endoscopen.



VENTIELDOPPEN

De wegwerp ventieldoppen voor het biopsiekanaal passen op endoscopen van Olympus, Fujifilm en Pentax



POLIEPENVAL

Dit 4-kamersysteem biedt de mogelijkheid om maximaal 4 poliepen of biopsiemateriaal afzonderlijk op te vangen




PROTRAP LUMA

Bestaat uit een slang, behuizing, specimen tray en lichtstaafje. De specimen trays vangen de poliepen op, zijn eenvoudig uitwisselbaar en passen in een weefselpotje



PROCTOSCOOP

Voor de betrouwbare diagnose van het rectum biedt MICRO-TECH verschillende proctoscopen in wegwerp-varianten aan. De proctoscopen zijn gemaakt van hoogwaardig kristalhelder plastic, dat een duidelijk zicht op de darmwand garandeert en bij de patiënt geen koud gevoel veroorzaakt. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt ook het onderzoek en voorkomt mogelijke verwondingen.

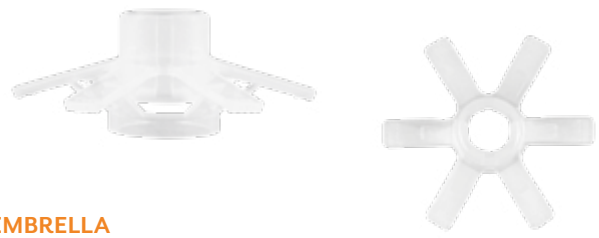

EMBRELLA

Tijdens een endoscopie belemmeren plooien in de darmwand het zicht en bemoeilijken poliepdetectie. Door het ontwerp van EMBRELLA wordt de darmwand voorzichtig aangespannen en de plooien gladgestreken. Tegelijkertijd centreert EMBRELLA de endoscoop en stabiliseert het de positie tijdens de behandeling. EMBRELLA is snel en eenvoudig op de endoscooptip te bevestigen.

SPECIFICATIES

REF	Omschrijving	Lengte mm	Buiten Ø mm	Binnen Ø mm
PROCTOSCOOP				
RA1480	Maat S, voor pediatrie; Kleur: wit	80	14	12
RA2295	Maat M; Kleur: geel	95	22	20
RA2695	Maat L; Kleur: rood	95	26	24
RA0001	Adapter voor koudlichtbron			

Verpakkingseenheid: Proctoscopen: 100 stuks / Koudlichtadapter: 1 stuks

REF	Compatibel distaal uiteinde van de endoscoop Ø mm	
EMBRELLA		
EM-S-01	12,8-14,5	Verpakkingseenheid: 10 stuks
EM-S-02	11,5-13	Verpakkingseenheid: 10 stuks

REF	Omschrijving	Maat
BIJTRINGEN		
AC01-102.M	Bijtring Ø 20 mm, geel, zonder hoofdband	Medium (M)
AC01-103.A	Atraumatische bijtring blauw, latexvrije hoofdband van Spandex/Lycra	Atraumatisch (A)
AC01-103.M	Bijtring Ø 20 mm, incl. textielbandje (bevat latex), blauw	Medium (M)
AC01-103.P	Bijtring, kind, incl. spandexbandje (latex vrij), licht blauw	Pediatrisch (P)

COLOSHORTS		
TX01-101.UZ	Colonoscopie onderzoeksbroekje, donkerblauw, materiaal PP	Afmetingen: 130 x 65 cm, verpakkingseenheid: 100 stuks

BIOPSIE VENTIELEN		
AC03-102.O	Blauw, voor Olympus- en Fujifilm-endoscopen (vanaf G5)	
AC03-101.P	Rood, voor Pentax-endoscopen	
AS2450000	Ventieldop biopsiekanaal, met spoelaansluiting, geschikt voor Olympus- en Fuji-endoscopen	
AS2460000	Ventieldop biopsiekanaal, met spoelaansluiting, geschikt voor Pentax-endoscopen	

POLIEPENVAL		
BBP-50	Poliepvalen met 4 verzamelkamers	

PROTRAP LUMA		
BBPA00001	ProTrap Luma In-Line Poliepenval	Verpakkingseenheid: 25 stuks/doos
BBPA10001	ProTrap Luma Specimen Tray	Verpakkingseenheid: 50 stuks/doos



DISPOSABLE ENDOSCOPIEVENTIEL

STERIELE VENTIELEN SETS VOOR EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID

Bij gebruik van herbruikbare ventielen kan ondanks de grootste zorgvuldigheid ten aanzien van reiniging, een infectierisico niet worden uitgesloten. Met de MICRO-TECH disposable ventielen krijgt u een efficiënt en veilig product om de bescherming van patiënten te garanderen. Handmatige en tijdrovende reinigingsprocessen zijn niet meer nodig. Voor u betekent dit: eenvoudige procedures, tijdsef-

ficiënt, minder kosten en minder infectierisico's voor uw patiënten. Alle MICRO-TECH ventielen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en nauwkeurig gefabriceerd om een optimale functionaliteit te garanderen. Het assortiment omvat ventielen voor de meest populaire endoscopen van Olympus, Fujifilm en Pentax.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Steriel en voor eenmalig gebruik
- Gebruiksklaar
- Verminderde kans op infectie patiënten en gebruikers
- Geen tijdrovende voorbereiding
- Meer efficiëntie en budgettaire zekerheid
- Compatibel met endoscopen van Olympus, Fujifilm en Pentax

VENTIELEN SETS FUJIFILM 500/600 & 700 SERIE AC03-211.F7 / AC03-212.F / AC03-212.F7



Biopsieventiel



Zuigventiel
500/600 serie



Zuigventiel
700 serie



Lucht-water ventiel
500/600 serie



Lucht-water ventiel
700 serie



Lucht-water reinigingsventiel
700 serie

VENTIELEN SETS OLYMPUS VANAF 140 SERIE AC03-212.O / AC03-215.O



Biopsieventiel



Zuigventiel



Lucht-water ventiel



Lucht-water
reinigingsventiel



Jet kanaal adapter

VENTIELEN SET PENTAX AC03-212.P



Biopsieventiel



Zuigventiel



Lucht-water ventiel

SPECIFICATIES

REF	Omschrijving	Verpakkingseenheid
JET KANAAL ADAPTER		
AC03-221.F7	Voor Fujifilm 700 serie endoscoop	Doos van 100, omdoos 800: 8 stuks van 100
AC03-221.O	Voor Olympus endoscoop	Doos van 100, omdoos 800: 8 stuks van 100
AC03-221.P	Voor Pentax endoscoop	Doos van 100, omdoos 800: 8 stuks van 100
ENDOSCOOP VENTIELEN SET		
AC03-211.F7	Voor Fujifilm 700 serie endoscoop met lucht-water-, zuigventiel	Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.F	Voor Fujifilm 500/600 serie endoscoop met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel	Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.F7	Voor Fujifilm 700 serie endoscoop met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel	Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-212.O	Voor Olympus endoscoop met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel	Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
AC03-215.O	Voor Olympus endoscoop met biopsie-, lucht-water-, zuig-, reinigingsventiel, jet kanaal adapter	Doos van 25, omdoos 125: 5 stuks van 25
AC03-212.P	Voor Pentax endoscoop met biopsie-, lucht-water-, zuigventiel	Doos van 25, omdoos 100: 4 stuks van 25
REINIGINGSVENTIEL		
AC03-220.F7	Voor Fujifilm 700 serie endoscoop	Doos van 100, omdoos 400: 4 stuks van 100
AC03-220.O	Voor Olympus endoscoop	Doos van 100, omdoos 400: 4 stuks van 100
DISTALE TIP PROTECTIE		
AC06-201	Buitendiameter endoscoop: 7 - 15 mm	100 stuks
AC06-202	Buitendiameter endoscoop: 2 - 10 mm	100 stuks



REINIGINGSBORSTELS

DE STANDAARD VOOR BETROUWBARE HYGIËNE

De reinigingsborstels voor eenmalig gebruik van MICRO-TECH zorgen voor een optimaal gereinigde endoscoop, zodat het risico op kruisbesmetting aanzienlijk wordt geminimaliseerd. Bovendien beschermen de borstels ook uw endoscoop. Kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden voorkomen dat het werkkanaal van de

endoscoop tijdens het reinigen wordt beschadigd. Wilt u uw werk nog veiliger, sneller en efficiënter maken, dan raden we de dubbele reinigingsborstels met 2 koppen aan. Daarmee kunnen twee reinigingshandelingen in één keer worden uitgevoerd.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- 2 borstelkoppen voor tijdbesparende reiniging
- Beschermende kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden
- Borstels gemaakt van duurzaam nylon
- Individueel hygiënisch verpakt



Handgrepen



Nylon borstels

CONISCHE BORSTELKOPPEN

Het assortiment wordt compleet gemaakt met de reinigingsborstel met taps toelopende borstelkoppen. Afhankelijk van uw voorkeur, zijn borstels met gelijkblijvende en dunner wordende borstel diameters beschikbaar. Conische borstelkoppen worden aangegeven met een T in het productnummer.



NAAR KEUZE: 1 OF 2 BORSTELKOPPEN

Bij de reinigingsborstels met één kop vergemakkelijkt een ergonomische vingerring het terugtrekken van de borstel. Als alternatief wordt het gebruik van dubbele reinigingsborstels aanbevolen. Die hebben aan weerszijden een borstelkop, zodat met één handeling twee keer geborsteld wordt, waardoor het reinigingsresultaat aanzienlijk wordt verbeterd.



EXACT PASSENDE DIAMETERS

Of het nu gaat om een bronchoscoop of een therapeutische endoscoop – voor elke endoscoop hebben wij de ideale reinigingsborstel met een diameter van 3 mm tot 11 mm.



SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Totale lengte mm	Borstels Ø mm	Borstellengte mm
REINIGINGSBORSTELS MET ÉÉN BORSTELKOP				
CB18-0050/18	1,8	1800	5	20
CB18-0050/23	1,8	2300	5	20
REINIGINGSBORSTELS MET TWEE BORSTELKOPPEN				
CB18-3030/18	1,8	1800	3/3	20/20
CB18-5050/18	1,8	1800	5/6	20/20
CB18-5050/23	1,8	2300	5/5	20/20
CB18-T5050/23	1,8	2300	5-7/5-7 toelopend	20/20
CB23-5050/23	2,3	2300	5/5	20/20
DCBS-08-10-15-180	0,8	1800	1,5/1,5	10/10

Verpakkingseenheid: 100 stuks

De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.

COMBI-REINIGINGSBORSTELS

DE 2-IN-1 OPLOSSING VOOR DE DAGELIJKE PRAKTIJK

Voor het reinigen van de kanalen, de lucht-/waterventielen en hun inlaten zijn verschillende borstels nodig. MICRO-TECH biedt hiervoor slimme oplossingen, die de dagelijkse routine efficiënter en eenvoudiger maken.

Met de combinatieborstels en reinigingsborstelset van MICRO-TECH kunt u meerdere handelingen uitvoeren om de endoscopen weer gebruiksklaar te maken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen en endoscoopkanalen
- Intensieve en snelle reiniging
- Beschermende kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden
- Borstels van duurzaam nylon
- Ook als set individueel hygiënisch verpakt



Taps toelopen



Beschermkogel

ÉÉN BORSTEL VOOR ALLE VENTIELEN


De dubbele reinigingsborstel voor de lucht- en waterventielen biedt alles wat een borstel voor deze reiniging dient te hebben. Aan de ene kant zorgt een 40 mm lange en 11 mm dikke borstelkop voor een grondige reiniging van de ventielinlaten. Aan de andere kant kunnen de ventielopeningen met de 20 mm lange en 5 mm dikke borstel zorgvuldig gereinigd worden. Kogelkopjes aan de uiteinden van de twee borstels voorkomen dat de kanalen van de endoscoop worden beschadigd.



Dubbele reinigingsborstels voor lucht-/waterventielen

COMBINATIEBORSTELS MET DUBBELE FUNCTIE

Een reinigingsborstel met een conische borstelkop voor de endoscoopkanalen en een lange, groot-kaliber borstelkop voor de lucht/water-ventielopeningen, maakt het mogelijk om zowel de kanalen als de ventielopeningen met één reinigingsborstel te borstelen. Dat is tijd en kostenbesparend.

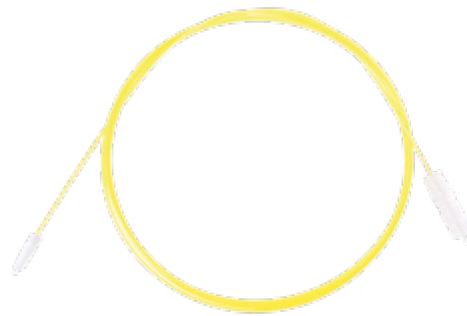

Combinatieborstel

SLIM EN GOEDKOOP: REINIGINGSBORSTELSET

Met deze set krijgt u handig in één keer, alle borstels die nodig zijn voor een grondige reiniging van de endoscoop. De set bestaat uit een reinigingsborstel voor een endoscoopkanaal en een reinigingsborstel voor een lucht/waterventiel. De borstels zijn individueel en hygiënisch verpakt in een zak.

SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Totale lengte mm	Borstels Ø mm	Borstellengte mm
REINIGINGSBORSTEL VOOR VENTIELOPENINGEN				
CB13-50120/01	1,3	160	5/12	20/40
COMBINATIEBORSTEL				
CB18-T50110/23	1,8	2300	5-7 toelopend/11	20/40
REINIGINGSBORSTELSET				
CB18-T5050/23-B				
CB18-T5050/23	1,8	2300	5-7 toelopend	20/20
CB13-50120/01	1,3	-	5/12	20/40

Verpakkingseenheid: 100 stuks

De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.



JET-CLEANER TYPE III

VEILIG EN VARIABEL SPOELEN

De Jet-Cleaner Type III van Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH stelt u in staat om spoelvloeistof veilig en variabel door het werkkanaal van de endoscoop te spoelen. Op die manier spoelt u bijv. intestinale bloedingen en bloedstolsels doelgericht weg of creëert u een optimaal zicht bij verontreinigingen in het darmkanaal. De spoelvloeistof kan daarbij in twee stappen worden gereguleerd: via het standaard werkkanaal of via het

jet-kanaal op de endoscoop. De Jet-Cleaner Type III kan worden aangesloten op alle standaard endoscopen met één werkkanaal. Bij de endoscoopmerken Olympus, Fujinon, Pentax en Storz is gelijktijdig spoelen en instrumenteren mogelijk, indien gebruik wordt gemaakt van de instrumentie-/spoeladapter (als accessoire verkrijgbaar) met overeenkomstig grote werkkkanalen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Variabele spoelingen van 700 – 1600 ml/min
- Voor alle standaard endoscoopmerken
- Spoelen via het werkkanaal of het jet-kanaal
- Tegelijkertijd spoelen en instrumenteren
- Compleet met voetschakelaar, vloeistoftank, slang en adapter

SPECIFICATIES

Productnummer	Omschrijving	Kenmerken
JET-CLEANER TYPE III		
000.548003	Jet-Cleaner Type III compleet	Met voedingseenheid, netsnoer, pneumatische voetschakelaar, vloeistofhouder 2 l, herbruikbare spoelslang, instrument-spoeladapter naar keuze, spoelcapaciteit 700 - 1600 ml/min
000.540035	Spoeladapter	Olympus/Storz Fujinon G5-endoscopen autoclaveerbaar
000.540037	Spoeladapter	Pentax autoclaveerbaar
000.540041	Spoeladapter	Met schroefdraad, Olympus/Storz Fujinon G5-endoscopen autoclaveerbaar
29-1007RV	Wegwerp-spoelslang incl. terugslagklep	250 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk, incl. terugslagklep, 1 VE = 20 stuks/staffelprijs op aanvraag
29-1007	Wegwerp-spoelslang	250 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk 1 VE = 20 stuks/staffelprijs op aanvraag
28-0165D	Wegwerp-spoelslang met flessendop	110 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk, incl. terugslagklep
28-0166D	Wegwerp-spoelslang met flessendop	200 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk
28-0166RVD	Wegwerp-spoelslang met flessendop	200 cm lang, met dubbelzijdig LLM-aanzetstuk, incl. terugslagklep

