



ZUBEHÖR

ENDOSKOPIE-ZUBEHÖR, -GERÄTE UND BÜRSTEN

ENDOSKOPIE-ZUBEHÖR

OPTIMAL AUSGERÜSTET BEI JEDEM EINGRIFF

MICRO-TECH versorgt Sie optimal mit Produkten rund um die Endoskopie. Das Sortiment umfasst wichtige Produkte für Ihren täglichen Bedarf wie Arbeitsschutz-Vorrichtungen für Ärztinnen, Ärzte und Personal sowie

Lösungen, die den Patientenkomfort erhöhen. Alle Produkte erfüllen die hohen medizinischen Standards, sind geprüft, zertifiziert nach DIN EN13485:2010 und entsprechen der Richtlinie 93/42/ EWG über Medizinprodukte.



EINMAL-BEISSRINGE

Unterschiedliche Konfigurationen stehen zur Auswahl: Standard und pädiatrische Beißringe sowie atraumatisch geformte Beißringe



EINMAL-COLOSHORTS

Weiches, saugfähiges Material, Farbe dunkelblau, mittels Klettverschluss verschließbare hintere Öffnung, Bund mit Gummizug



EINMAL-BIOPSIEKANAL VENTILKAPPE MIT SPÜLANSCHLUSS

Passend für Olympus und Fujifilm-Endoskope



EINMAL-VENTILKAPPEN

Die Einmal-Ventilkappen für den Biopsiekanal passen auf Endoskope von Olympus, Fujifilm und Pentax




POLYPENFALLE

Das 4-Kammersystem erlaubt, dass bis zu 4 Polypen oder Biopsiematerial getrennt aufgefangen werden können



PROTRAP LUMA

Besteht aus Schlauch, Fallenkörper, Auffangsieb und Leuchtstab. Die Schalen fangen die Polypen auf, sind leicht austauschbar und passen in ein Standard-Probengefäß

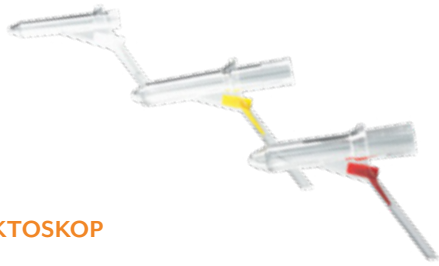

PROKTOSKOP

Für die sichere Diagnose des Enddarms stellt MICRO-TECH verschiedene Proktoskope als Einweg-Variante zur Verfügung. Die Proktoskope bestehen aus hochwertigem, glasklarem Kunststoff, der eine freie Sicht auf die Darmwand gewährleistet und beim Patienten kein Kältegefühl erzeugt. Die glatte Oberfläche erleichtert zudem die Untersuchung und verhindert mögliche Verletzungen.



EMBRELLA

Bei Endoskopien behindern Falten in der Darmwand die Sicht und erschweren die Polypen-Detektion. Das Design der EMBRELLA Kappe strafft die Darmwand und glättet sie sanft. Gleichzeitig wird das Endoskop zentriert und die Positionierung stabilisiert. Die Befestigung der Kappe erfolgt einfach und schnell an der Endoskopspitze.

SPEZIFIKATIONEN

REF	Beschreibung	Länge mm	Ø Aussen mm	Ø Innen mm
PROKTOSKOP				
RA1480	Größe S für Padiatrie, Farbe: weiß	80	14	12
RA2295	Größe M, Farbe: gelb	95	22	20
RA2695	Größe L, Farbe: rot	95	26	24
RA0001	Adapter für Kaltlichtquelle			
Verpackungseinheit: Proktoskope: 100 Stück / Kaltlichtadapter: 1 Stück				
REF	Kompatibles Endoskop Distalende Ø mm			
EMBRELLA				
EM-S-01	12,8-14,5	Verpackungseinheit: 10 Stück		
EM-S-02	11,5-13	Verpackungseinheit: 10 Stück		
REF	Beschreibung	Maße		
BEISSRING				
AC01-102.M	Einmal-Textilkopfband blau (auch einzeln erhältlich)	Medium (M)		
AC01-103.A	Atraumatisch geformter Einmal-Beißring blau, latexfreies Textilkopfband	Atraumatisch (A)		
AC01-103.M	Einmal-Beißring blau, Textilkopfband, beinhaltet Latex	Medium (M)		
AC01-103.P	Pädiatrischer Einmal-Beißring, latexfreies Textilkopfband Pedia	Pediatrisch (P)		
COLOSHORTS				
TX01-101.UZ	Einmal-Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, Material PP	Maße: 130x65 cm, Universalgröße, passend für alle Patienten, Verpackungseinheit: 100 Stück		
BIOPSIEVENTILE				
AC03-102.O	blau, für Olympus- und Fujifilm-Endoskope (ab G5)			
AC03-101.P	rot, für Pentax-Endoskope			
AS2450000	Einmal-Biopsiekanal Ventilkappe mit Spülanschluss, passend für Olympus und Fuji-Endoskope			
AS2460000	Einmal-Biopsiekanal Ventilkappe mit Spülanschluss, passend für Pentax-Endoskope			
POLYPENFALLEN				
BBP-50	Einmal-Polypenfallen mit 4 Auffangkammern			
PROTRAP LUMA				
BBPA00001	ProTrap Luma Inline-Polypenfalle	Verpackungseinheit: 25 Stück pro Box		
BBPA10001	ProTrap Luma Probeschale	Verpackungseinheit: 50 Stück pro Box		



EINWEG-ENDOSKOPIEVENTILE

STERILE VENTIL-SETS FÜR MEHR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT

Bei der Verwendung von Mehrweg-Ventilen kann trotz größter Sorgfalt in der Aufbereitung ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Mit den Einweg-Ventilen von MICRO-TECH erhalten Sie ein effizientes und sicheres Produkt, um den Schutz für Anwender und Patienten zu gewährleisten. Manuelle und zeitaufwendige Reinigungsprozesse entfallen. Für Sie bedeutet dies: Einfache

Abläufe, geringerer Zeit- und Kostenaufwand, Entfall der Dokumentation von Aufbereitungsschritten und Senkung von Infektionsrisiken Ihrer Patienten. Alle MICRO-TECH Ventile werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und präzise verarbeitet, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten. Das Sortiment umfasst Ventile für die gängigen Endoskope von Olympus, Fujifilm und Pentax.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Steriler Einmalgebrauch
- Sofort einsatzbereit
- Reduziertes Infektionsrisiko für Arzt und Patienten
- Keine zeitaufwendige Aufbereitung
- Mehr Effizienz und Budgetsicherheit
- Kompatibel mit Endoskopen von Olympus, Fujifilm und Pentax

VENTIL-SETS FUJIFILM SERIE 500/600 & 700 AC03-211.F7 / AC03-212.F / AC03-212.F7



Biopsieventil



Absaugventil
500/600er Serie



Absaugventil
700er Serie



Luft-/Wasser-Ventil
500/600er Serie



Luft-/Wasser-Ventil
700er Serie



Luft-/Wasser-Reinigungsventil
700er Serie

VENTIL-SETS OLYMPUS AB SERIE 140 AC03-212.O / AC03-215.O



Biopsieventil



Absaugventil



Luft-/Wasser-Ventil



Luft-/Wasser-
Reinigungsventil



Jet-Kanal-Adapter



Biopsieventil



Absaugventil



Luft-/Wasser-Ventil

VENTIL-SET PENTAX AC03-212.P

SPEZIFIKATIONEN

REF	Beschreibung	Verpackungseinheit
JET KANAL ADAPTER		
AC03-221.F7	Für Fujifilm 700 Serie Endoskope	Box zu 100, Karton 800 Stück: 8 Stück zu 100
AC03-221.O	Für Olympus Endoskope	Box zu 100, Karton 800 Stück: 8 Stück zu 100
AC03-221.P	Für Pentax Endoskope	Box zu 100, Karton 800 Stück: 8 Stück zu 100
ENDOSKOP VENTIL SET		
AC03-211.F7	Für Fujifilm 700 Serie Endoskope mit Luft-Wasser-, Absaugventil	Box zu 25, Karton 100 Stück: 4 Stück zu 25
AC03-212.F	Für Fujifilm 500/600 Serie Endoskope mit Biopsie-, Luft-Wasser-, Absaugventil	Box zu 25, Karton 100 Stück: 4 Stück zu 25
AC03-212.F7	Für Fujifilm 700 Serie Endoskope mit Biopsie-, Luft-Wasser-, Absaugventil	Box zu 25, Karton 100 Stück: 4 Stück zu 25
AC03-212.O	Für Olympus Endoskope mit Biopsie-, Luft-Wasser-, Absaugventil	Box zu 25, Karton 100 Stück: 4 Stück zu 25
AC03-215.O	Für Olympus Endoskope mit Biopsie-, Luft-Wasser-, Absaug-, Reinigungsventil, Jet-Kanal-Adapter	Box zu 25, Karton 125 Stück: 5 Stück zu 25
AC03-212.P	Für Pentax Endoskope mit Biopsie-, Luft-Wasser-, Absaugventil	Box zu 25, Karton 100 Stück: 4 Stück zu 25
REINIGUNGSVENTIL		
AC03-220.F7	Für Fujifilm 700 Serie Endoskope	Box zu 100, Karton 400 Stück: 4 Stück zu 100
AC03-220.O	Für Olympus Endoskope	Box zu 100, Karton 400 Stück: 4 Stück zu 100
SCHUTZKAPPE DISTALSPITZE		
AC06-201	Außendurchmesser Endoskop: 7-15 mm (wie eingetragen)	100 Stück
AC06-202	Außendurchmesser Endoskop: 2-10 mm (wie eingetragen)	100 Stück



EINMAL-REINIGUNGSBÜRSTEN

FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE REINIGUNG

Die Einmal-Reinigungsbürsten von MICRO-TECH sorgen für ein optimal gereinigtes Endoskop, so dass das Risiko der Kreuzkontamination erheblich minimiert wird. Darüber hinaus schützen die Bürsten auch Ihr Endoskop. Kugelköpfchen an den Bürstenenden verhindern, dass der Arbeitskanal des Endoskops während der Reinigung

beschädigt wird. Möchten Sie Ihre Arbeit noch sicherer, schneller und effizienter machen, empfehlen sich Einmal-Doppel-Reinigungsbürsten mit 2 Köpfen. Dadurch können in einem Arbeitsschritt gleich zwei Reinigungsvorgänge durchgeführt werden.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- 2 Bürstenköpfe zur zeitsparenden Reinigung
- Schutzkugeln an Bürstenköpfen
- Bürsten aus widerstandsfähigem Nylon
- Einzeln rein verpackt



Handgriffe



Nylonbürsten

KONISCHE BÜRSTENKÖPFE

Das Produktprogramm ist durch Einmal-Reinigungsbürsten mit sich verjüngenden Bürstenköpfen zusätzlich komplettiert worden. Je nach Präferenz stehen Bürsten mit gleichbleibenden und dünner werdenden Bürstendurchmessern zur Verfügung. Konische Bürstenköpfe werden mit einem T in der Produktnummer angezeigt.



1 ODER 2 BÜRSTENKÖPFE ZUR AUSWAHL

Bei den einköpfigen Reinigungsbürsten erleichtert ein ergonomischer Fingerring das Zurückziehen der Bürste. Alternativ empfiehlt sich der Einsatz der Doppel-Reinigungsbürsten. Sie verfügen über jeweils einen Bürstenkopf an beiden Enden, so dass mit einem Arbeitsschritt zweimal gebürstet und der Reinigungs Erfolg somit deutlich verbessert wird.



PASSGENAUE DURCHMESSER

Ob Bronchoskop oder Therapie-Endoskop mit großem Arbeitskanal – Sie erhalten für jedes Endoskop die ideale Reinigungsbürste mit einem Durchmesser von 3 mm bis hin zu 11 mm.



SPEZIFIKATIONEN

REF	Katheter Ø mm	Gesamtlänge mm	Bürsten Ø mm	Bürstenlänge mm
REINIGUNGSBÜRSTEN MIT EINEM BÜRSTENKOPF				
CB18-0050/18	1,8	1800	5	20
CB18-0050/23	1,8	2300	5	20
REINIGUNGSBÜRSTEN MIT ZWEI BÜRSTENKÖPFEN				
CB18-3030/18	1,8	1800	3/3	20/20
CB18-5050/18	1,8	1800	5/6	20/20
CB18-5050/23	1,8	2300	5/5	20/20
CB18-T5050/23	1,8	2300	5-7/5-7 verjüngt	20/20
CB23-5050/23	2,3	2300	5/5	20/20
DCBS-08-10-15-180	0,8	1800	1,5/1,5	10/10

Verpackungseinheit: 100 Stück

Die Katheter-Farben der Bürsten können variieren.

KOMBI-REINIGUNGSBÜRSTEN

DIE 2-IN-1 LÖSUNG FÜR DEN PRAXIS- UND KLINIK-ALLTAG

Die Reinigung der Kanäle, der Luft-/Wasserventile und deren Einlässe erfordert unterschiedliche Bürsten. MICRO-TECH bietet hierfür clevere Lösungen an, die den Praxis-Alltag effizienter und einfacher machen.

Mit den Kombinationsbürsten und dem Reinigungsbürsten-Set von MICRO-TECH lassen sich gleich mehrere Arbeitsschritte bei der Wiederaufbereitung der Endoskope erledigen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Doppelreinigungsbürste für Luft-/Wasserventile und Endoskopkanäle
- Intensive und schnelle Reinigung
- Kugelköpfchen an beiden Bürsten
- Bürsten aus unempfindlichem Nylon
- Auch als Set einzeln rein verpackt



Verjüngung



Schutzkugel

EINE BÜRSTE FÜR ALLE VENTILE


Die Doppelreinigungsbürste für die Luft- und Wasserventile bietet alles, was eine Bürste für diese Reinigung erfüllen muss. Auf der einen Seite sorgt ein 40 mm langer und 11 mm dicker Bürstenkopf für eine gründliche Reinigung der Ventileinlässe. Auf der anderen Seite können mit der 20 mm langen und 5 mm dicken Bürste sorgfältig die Ventilöffnungen gereinigt werden. Kugelköpfchen an den Enden der beiden Bürsten verhindern, dass die Kanäle des Endoskops beschädigt werden können.



Doppelreinigungsbürste für Luft-/Wasserventile

KOMBINATIONSBÜRSTE MIT DOPPELFUNKTION

Eine Reinigungsbürste mit einem konischen Bürstenkopf für die Endoskopkanäle und einem großkalibrigen und langen Bürstenkopf für die Luft-/Wasser-Ventilöffnungen ermöglicht das Bürsten der Kanäle und der Ventilöffnungen mit einer Reinigungsbürste. Das ist zeitsparend und kostensenkend.

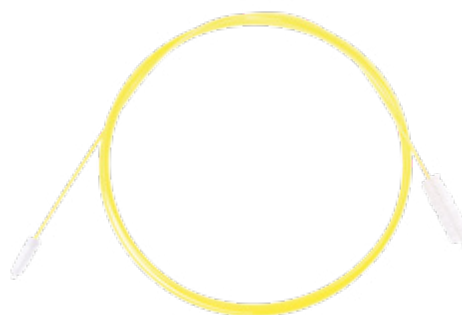

Kombinationsbürste

CLEVER UND GÜNSTIG: REINIGUNGSBÜRSTEN-SET

Mit diesem Set erhalten Sie alle Bürsten für die gründliche Reinigung des Endoskops bequem auf einmal. Es beinhaltet eine Endoskopkanal-Reinigungsbürste sowie eine Luft-/Wasserventil-Reinigungsbürste. Die Bürsten sind einzeln und rein in einer Tüte verpackt.

SPEZIFIKATIONEN

REF	Katheter Ø mm	Gesamtlänge mm	Bürsten Ø mm	Bürstenlänge mm
REINIGUNGSBÜRSTE FÜR VENTILEINLÄSSE				
CB13-50120/01	1,3	160	5/12	20/40
KOMBINATIONSBÜRSTE				
CB18-T50110/23	1,8	2300	5-7 verjüngt/11	20/40
REINIGUNGSBÜRSTEN-SET				
CB18-T5050/23-B				
CB18-T5050/23	1,8	2300	5-7 verjüngt	20/20
CB13-50120/01	1,3	-	5/12	20/40

Verpackungseinheit: 100 Stück

Die Katheter-Farben der Bürsten können variieren.



JET-CLEANER TYP III

SICHER UND VARIABEL SPÜLEN

Der Jet-Cleaner Typ III der Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH ermöglicht es Ihnen, Spülflüssigkeit sicher und variabel durch den Arbeitskanal des Endoskops zu applizieren. So spülen Sie z.B. intestinale Blutungen und Koagel gezielt weg oder stellen eine optimale Sicht bei Verschmutzungen im Darmtrakt her. Die Spülflüssigkeit kann dabei in zwei Stufen reguliert werden: Über den Standard-Arbeitskanal oder über den am Endoskop vor-

handenen Jet-Kanal. Der Jet-Cleaner Typ III kann an alle gängigen Endoskope mit einem Arbeitskanal angeschlossen werden. Für die Endoskop-Marken Olympus, Fujinon, Pentax und Storz ist bei Verwendung des Instrumentier-/Spül-Adapters (als Zubehör erhältlich) gleichzeitiges Spülen und Instrumentieren bei entsprechend großen Arbeitskanälen möglich.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Variable Spüleistung von 700 – 1.600 ml/Min
- Für alle gängigen Endoskop-Marken
- Spülung über Arbeitskanal oder Jet-Kanal
- Gleichzeitiges Spülen und Instrumentieren
- Komplett mit Fußschalter, Flüssigkeitsbehälter, Schlauch und Adapter

SPEZIFIKATIONEN

Produkt Nummer	Bezeichnung	Merkmale
JET-CLEANER TYP III		
000.548003	Jet-Cleaner Typ III komplett	mit Netzteil, Netzkabel, pneumatischer Fußschalter, Flüssigkeitsbehälter 2L, Mehrweg-Spülschlauch, Instrumenten-Spüladapter nach Wahl, Spüleistung 700 - 1600 ml/Min.
000.540035	Spüladapter	Olympus / Storz Fujinon G5-Endoskope autoklavierbar
000.540037	Spüladapter	Pentax autoklavierbar
000.540041	Spüladapter	mit Schraubgewinde, Olympus / Storz Fujinon G5-Endoskope autoklavierbar
29-1007RV	Einmal-Spülschlauch inkl. Rückschlagventil	250 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz, inkl. Rückschlagventil, 1 VE = 20 Stück / Staffelpreis auf Anfrage
29-1007	Einmal-Spülschlauch	250 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz, 1 VE = 20 Stück / Staffelpreis auf Anfrage
28-0165D	Einmal-Spülschlauch mit Flaschendeckel	110 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz, inkl. Rückschlagventil
28-0166D	Einmal-Spülschlauch mit Flaschendeckel	200 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz
28-0166RVD	Einmal-Spülschlauch mit Flaschendeckel	200 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz inkl. Rückschlagventil

