



SURETRAC


BESSERE SICHT BEI DER ESD

Das MICRO-TECH Traction Device „SureTrac“ bietet eine praktische und bewährte Methode zur Unterstützung von ESD Prozeduren im Gastrointestinaltrakt. Mit dem LOCKADO™ Premium Clip und dem elastischen Silikonband ermöglicht das vorgeladene System eine effiziente Gewebespannung und verbessert die Sicht auf den Resektionsbereich. Die einfache Fixierung erfolgt durch das

Einhaken mittels eines zweiten Clips in einen der vier zu Verfügung stehenden Ringe. Die vier Ringe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Spannweite und können während der Prozedur nachjustiert werden. Der SureTrac stellt ein funktionales System dar, das eine einfache Handhabung ermöglicht und den klinischen Workflow effektiv unterstützt.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Vorgeladenes Traction System
- Elastisches latexfreies Silikonband
- Kleiner Haltering sichert Silikonband am Cliparm
- Verbesserte Sicht auf den Resektionsbereich

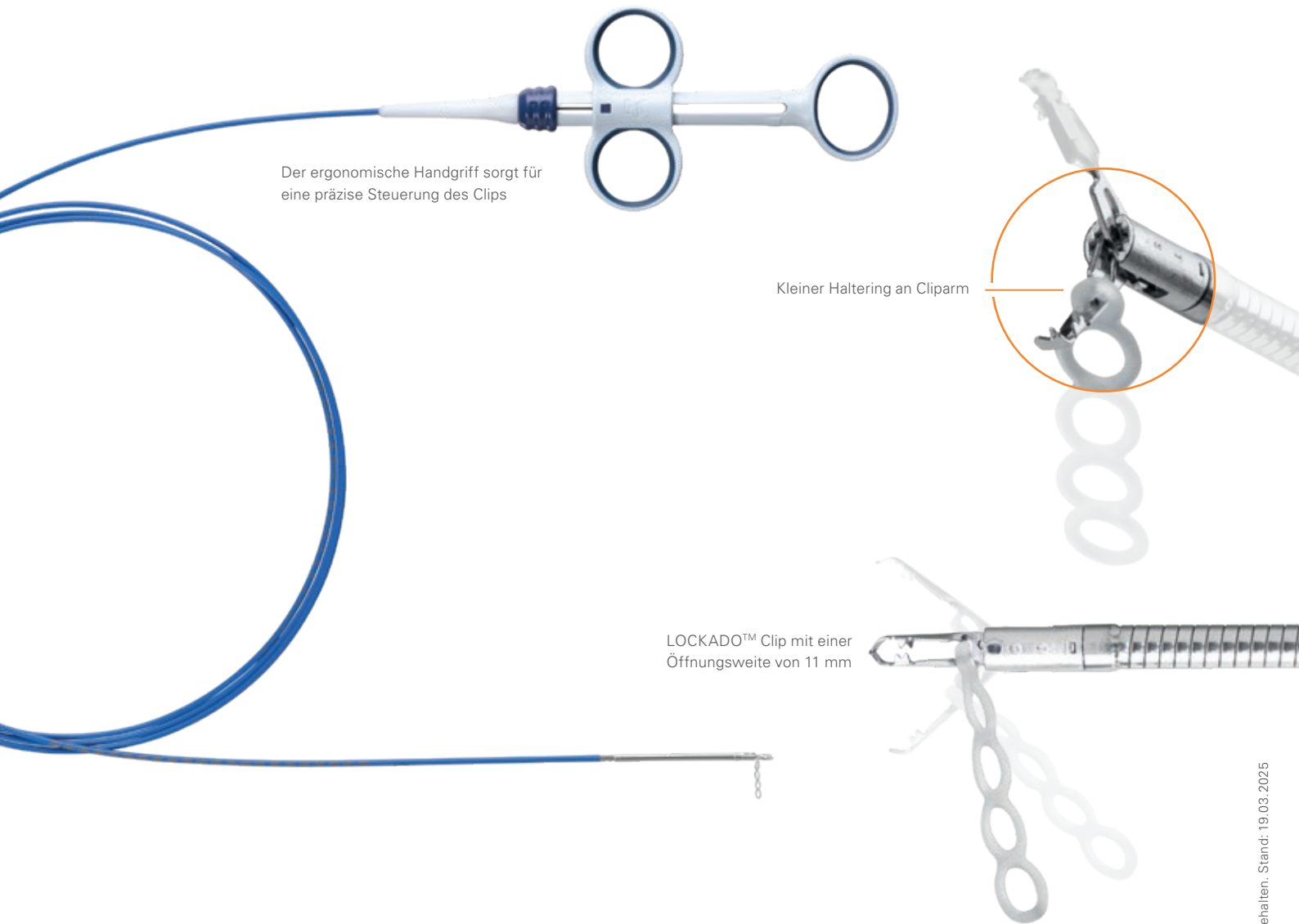

Der ergonomische Handgriff sorgt für eine präzise Steuerung des Clips

Kleiner Haltering an Cliparm

LOCKADO™ Clip mit einer Öffnungsweite von 11 mm

SPEZIFIKATIONEN

REF	Clip max. Öffnungsweite mm	Gesamtlänge mm	Arbeitskanal Ø mm	Innendurchmesser mm zwischen 1. und 4. Ring
SURETRAC				
ETD01008	11	2350	3,2	12,3

Verpackungseinheit: 10 Stück

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 19.03.2025